


# Guia Rápido - Quantum Blue® Reader de 3ª geração - Fast Track Mode



Ligue o Quantum Blue® Reader e siga as instruções mostradas na tela.

Se solicitado, forneça a ID de usuário e senha.

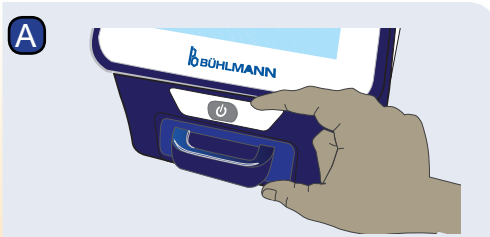

Para iniciar uma nova medição, pressione "INICIAR NOVO TESTE".



Selecione um teste disponível (C, 1) e prossiga com a etapa D, ou então pressione "Novo teste/ID Lote" (C, 2) para inserir um novo método e prossiga com a etapa E.



Se a ID requerida do lote estiver disponível na lista, selecione a ID de lote apropriada no menu (D, 1) e prossiga com a etapa E.

Se a ID requerida do lote não estiver disponível, pressione "Novo teste/ID Lote" (D, 2) e prossiga com a etapa E.



Abra a gaveta e coloque o cartão de código de barras no suporte, conforme indicado.



Feche a gaveta e inicie o processo de leitura pressionando "Ler". O método de teste apropriado será então carregado no leitor.




Remova o cartão de código de barras e pressione "Continuar".




Alguns métodos de teste podem requerer a seleção do tipo de espécime e/ou a diluição da amostra.

Se solicitado, selecione o seu tipo de espécime e/ou a diluição da amostra no submenu de opções.

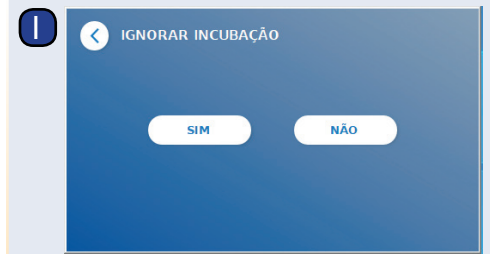

Na tela IGNORAR INCUBAÇÃO, pressione "SIM" se o tempo de incubação for controlado por um cronômetro externo. Pressione "NÃO" caso o tempo de incubação precise ser cronometrado pelo leitor.

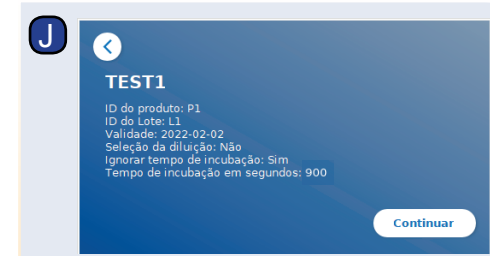

Uma janela-resumo aparecerá na tela, exibindo todos os parâmetros específicos do teste.

Se o resumo específico do teste e as configurações estiverem corretos, pressione "Continuar". Caso contrário, retorne (←) à etapa C, se desejar, para alterar as configurações do teste.




Insira a ID do paciente/amostra usando o teclado ou um leitor de código de barras externo\*.

Pelo menos 3 caracteres precisam ser inseridos. Pressione "Continuar" para acessar a tela de medição.

## CRONÔMETRO EXTERNO IGNORAR INCUBAÇÃO, OPÇÃO "SIM" SELECIONADA

L1

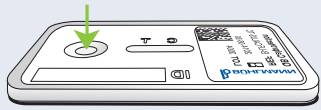

Desembale o cassete do teste. Aplique a amostra no orifício de carga da amostra de cassete do teste (L1)...


Nota: Para verificar os volumes de aplicação, consulte as instruções de uso correspondentes do teste.

L2



... e ajuste um cronômetro manualmente (L2). O tempo de incubação específico do teste é definido nas instruções de uso correspondentes do teste.

L3

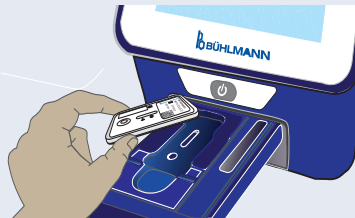

Abra a gaveta e coloque o cassete do teste no suporte de cassete, conforme indicado (L3).


M



Feche a gaveta e pressione "Iniciar medição" assim que o tempo de incubação houver decorrido. O leitor irá fazer a medição do cassete do teste (N2).

## CRONÔMETRO INTERNO IGNORAR INCUBAÇÃO, OPÇÃO "NÃO" SELECIONADA


L1

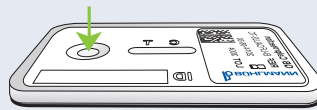

Desembale o cassete do teste. Aplique a amostra no orifício de carga da amostra de cassete do teste (L1).

Nota: Para verificar os volumes de aplicação, consulte as instruções de uso correspondentes do teste.

L2

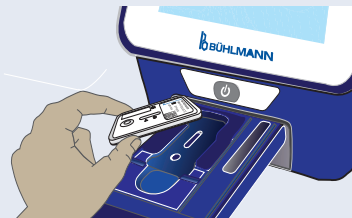

Abra a gaveta e coloque o cassete do teste no suporte de cassete, conforme indicado (L2),...

M




...feche a gaveta e continue imediatamente, pressionando "Iniciar medição".

N1



O leitor executará o teste, começando pela incubação específica do método (N1), seguida da medição do cassete do teste (N2).

O

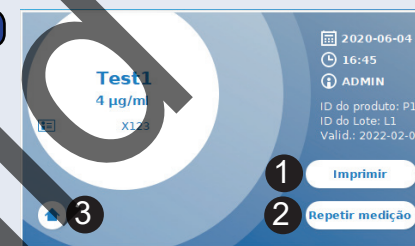

O resultado é mostrado na tela-resumo dos resultados. Você pode imprimir o resultado (O, 1); repetir o teste, usando as mesmas configurações (O, 2), ou então retornar à tela inicial (O, 3).

Nota: Os resultados são salvos automaticamente. A impressão somente é possível se uma impressora dedicada estiver conectada via USB\*.

Pressione o botão liga/desliga por 2 segundos para desligar o Quantum Blue® Reader.

\*consulte o manual do Quantum Blue® Reader, capítulo "Instalação de componentes de hardware / acessórios" para obter informações detalhadas.



BÜHLMANN Laboratories AG  
Baselstrasse 55  
4124 Schönenbuch  
Suíça

Fone +41 61 487 12 12  
Fax +41 61 487 12 99  
info@buhlmannlabs.ch  
www.buhlmannlabs.ch