


Guia Rápido - Quantum Blue® Reader de 3ª geração - Fast Track Mode




Ligue o Quantum Blue® Reader e siga as instruções mostradas na tela.


Se solicitado, forneça a ID de usuário e senha.

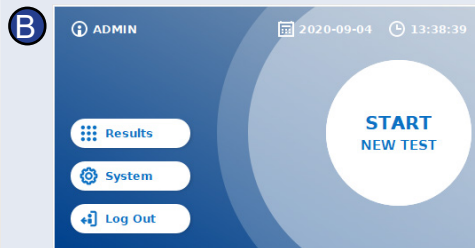

Para iniciar uma nova medição, pressione "INICIAR NOVO TESTE (START NEW TEST)".

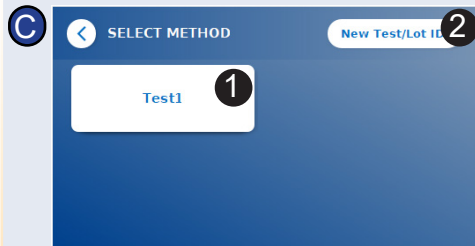

Selecione um teste disponível (C, 1) e prossiga com a etapa D, ou então pressione "Novo teste/ID Lote" (C, 2) para inserir um novo método e prossiga com a etapa E.

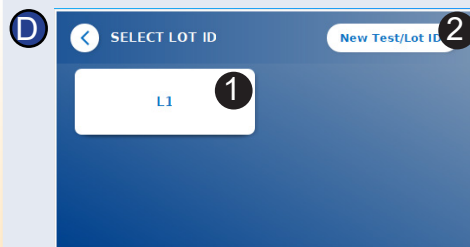


Se a ID requerida do lote estiver disponível na lista, selecione a ID de lote apropriada no menu (D, 1) e prossiga com a etapa H.


Se a ID requerida do lote não estiver disponível, pressione "Novo teste/ID Lote" (D, 2) e prossiga com a etapa E.




Abra a gaveta e coloque o cartão de código de barras no suporte, conforme indicado.

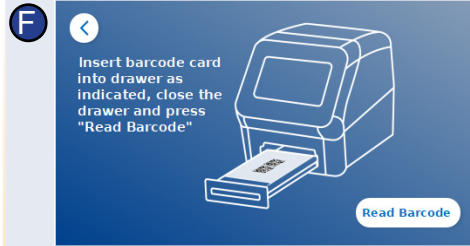

Feche a gaveta e inicie o processo de leitura pressionando "Ler (Read Barcode)". O método de teste apropriado será então carregado no leitor.

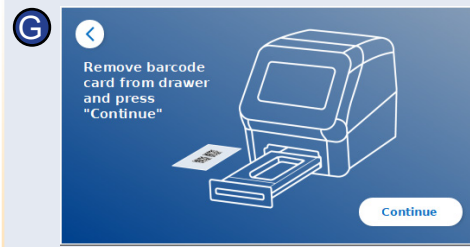


Remova o cartão de código de barras e pressione "Continuar (Continue)".

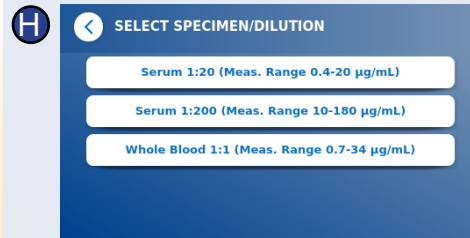


Alguns métodos de teste podem requerer a seleção do tipo de espécime e/ou a diluição da amostra.

Se solicitado, selecione o seu tipo de espécime e/ou a diluição da amostra no submenu de opções.

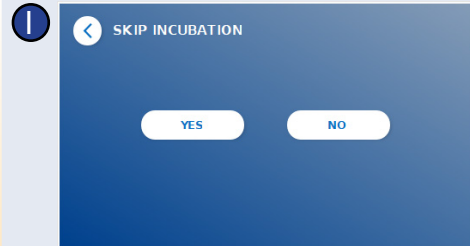

Na tela IGNORAR INCUBAÇÃO, pressione "SIM (YES)" se o tempo de incubação for controlado por um cronômetro externo. Pressione "NÃO (NO)" caso o tempo de incubação precise ser cronometrado pelo leitor.

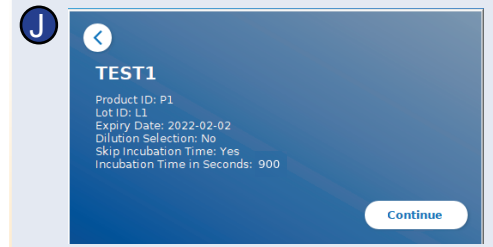

Uma janela-resumo aparecerá na tela, exibindo todos os parâmetros específicos do teste.

Se o resumo específico do teste e as configurações estiverem corretos, pressione "Continuar (Continue)". Caso contrário, retorne (⏪) à etapa C, se desejar, para alterar as configurações do teste.




Digite a ID do paciente/da amostra usando o teclado na tela, um teclado externo ou um leitor de código de barras externo*.

Pelo menos 3 caracteres precisam ser inseridos. Pressione "Continuar (Continue)" para acessar a tela de medição.

Guia Rápido - Quantum Blue® Reader de 3ª geração - Fast Track Mode

CRONÔMETRO EXTERNO IGNORAR INCUBAÇÃO, OPÇÃO "SIM" SELECIONADA

L1

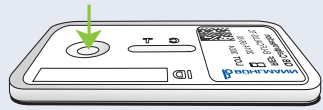

Desembale o cassete do teste. Aplique a amostra no orifício de carga da amostra de cassete do teste (L1)...


Nota: Para verificar os volumes de aplicação, consulte as instruções de uso correspondentes do teste.

L2




... e ajuste um cronômetro manualmente (L2). O tempo de incubação específico do teste é definido nas instruções de uso correspondentes do teste.

L3

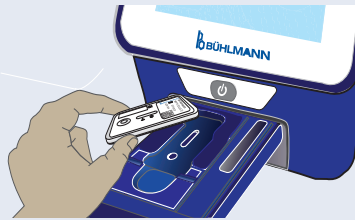

Abra a gaveta e coloque o cassete do teste no suporte de cassete, conforme indicado (L3).


M

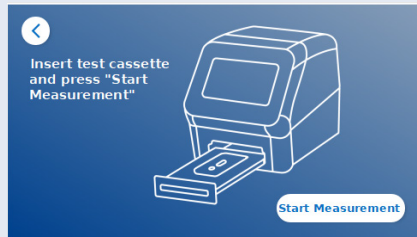

Feche a gaveta e pressione "Iniciar medição (Start Measurement)" assim que o tempo de incubação houver decorrido. O leitor irá fazer a medição do cassete do teste (N2).

CRONÔMETRO INTERNO IGNORAR INCUBAÇÃO, OPÇÃO "NÃO" SELECIONADA


L1

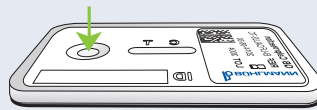

Desembale o cassete do teste. Aplique a amostra no orifício de carga da amostra de cassete do teste (L1).

Nota: Para verificar os volumes de aplicação, consulte as instruções de uso correspondentes do teste.

L2

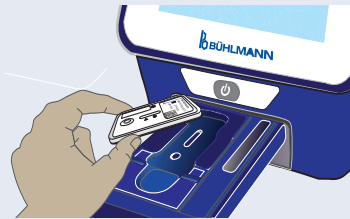

Abra a gaveta e coloque o cassete do teste no suporte de cassete, conforme indicado (L2),...

M




...feche a gaveta e continue imediatamente, pressionando "Iniciar medição (Start Measurement)".

N1



O leitor executará o teste, começando pela incubação específica do método (N1), seguida da medição do cassete do teste (N2).

O

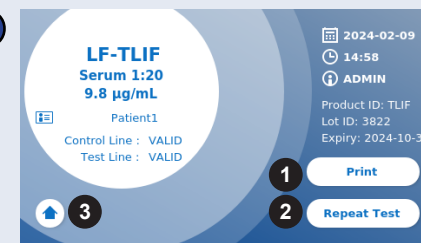

O resultado é mostrado na tela-resumo dos resultados. Você pode imprimir o resultado (O, 1); repetir o teste, usando as mesmas configurações (O, 2), ou então retornar à tela inicial (O, 3).

Nota: Os resultados são salvos automaticamente. A impressão somente é possível se uma impressora dedicada estiver conectada via USB*.

Pressione o botão liga/desliga por 2 segundos para desligar o Quantum Blue® Reader.

*consulte o manual do Quantum Blue® Reader, capítulo "Instalação de componentes de hardware / acessórios" para obter informações detalhadas.



BÜHLMANN Laboratories AG
Baselstrasse 55
4124 Schönenbuch
Suíça

Fone +41 61 487 12 12
Fax +41 61 487 12 99
info@buhlmannlabs.ch
www.buhlmannlabs.ch

Isenção de responsabilidade: As capturas de tela nesta instrução de uso são apenas para fins de demonstração e podem variar dependendo do idioma de leitura selecionado, do método de teste usado e do número do lote.